


Empore SPE Disk Kartuschen

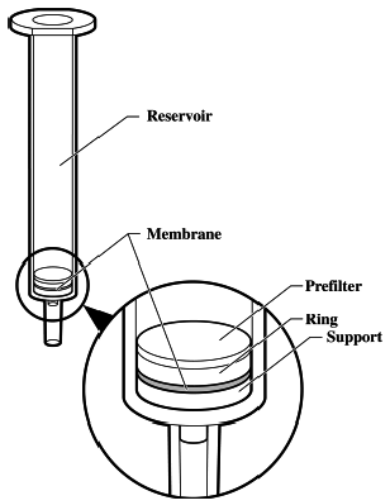

Empore SPE Disk Kartuschen bestehen aus einem Kartuschenkörper (Reservoir) aus Polypropylen an dessen unteren Ende die Extraktions Disk fixiert ist.

Die Disk der Empore SPE Kartusche setzt sich aus Support Membrane, Ring und Vorfilter zusammen:

Support: aus Polypropylen

Membrane: dünne Membrane aus PTFE und Sorbens Partikel; erhältlich mit zwei Partikelgrößen*

Polypropylen Ring: liegt über der Membrane und fixiert diese in der Kartusche

Vorfilter: Vorfilter aus Polypropylen: liegt über dem Polypropylen Ring. Der patentierte Vorfilter mit abgestufter Dichte wird mit jeder Schicht feinerporiger und verbessert die Flussrate partikelreicher Proben.

* erhältliche Partikelgrößen

Standard Density (SD)

Partikelgröße 40 - 60 μm

für normale oder viskose Matrix; empfohlen für die meisten Anwendungen


High Density (HD)

kleine Partikelgröße von 12 μm

für kleine Elutionsvolumen und relativ partikelfreie Matrix (z. Bsp. Wasser oder filtriertes Serum)

Probenvolumen	Elutionsvolumen	Partikelgröße		Membran Dicke		Silika Masse		Disk \varnothing	Kartuschen- volumen
		(SD)	(HD)	(SD)	(HD)	(SD)	(HD)		
50 μl - 500 μl	100 - 200 μl	40 - 60 μm	12 μm	0.75 mm	0.5 mm	5.5 mg	4 mg	4 mm	1 ml
100 μl - 2 ml	200 - 400 μl	40 - 60 μm	12 μm	0.75 mm	0.5 mm	12 mg	7.5 mg	7 mm	3 ml
500 μl - 6 ml	600 - 1000 μl	40 - 60 μm	12 μm	0.75 mm	0.5 mm	24 mg	15 mg	10 mm	6 ml

Phase Funktionale Gruppe	C2 Ethyl	C8 Octyl	C18 Octadecyl	MPC C8 + SCX Mischphase	SDB-XC Polymer für RP	SDB-RPS Polymer hydrop.
Standard Density						
4 mm / 1 ml Kartusche	83M-4111(SD)	83M-4114(SD)	83M-4115(SD)	83M-4130(SD)	-	-
7 mm / 3 ml Kartusche	83M-4211(SD)	83M-4214(SD)	83M-4215(SD)	83M-4230(SD)	-	-
10 mm / 6 ml Kartusche	83M-4311(SD)	83M-4314(SD)	83M-4315(SD)	83M-4330(SD)	-	-
High Density						
4 mm / 1 ml Kartusche	83M-4111(HD)	83M-4114(HD)	83M-4115(HD)	83M-4130(HD)	-	83M-4111(HD)
7 mm / 3 ml Kartusche	83M-4211(HD)	83M-4214(HD)	83M-4215(HD)	83M-4230(HD)	83M-4240(HD)	83M-4211(HD)
10 mm / 6 ml Kartusche	83M-4311(HD)	83M-4314(HD)	83M-4315(HD)	83M-4330(HD)	83M-4340(HD)	83M-4311(HD)

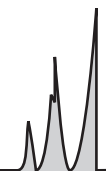

Labormäntel aus BodyGardz™ Gewebe

- ☛ Flüssigkeitsabweisend
- ☛ Chemisch behandelt, so dass sich keine Microorganismen darin festsetzen können
- ☛ Leicht und atmungsaktiv
- ☛ Kragen und Armbündchen mit Velcro-Verschluss

BodyGardz™ Polyester Material

BodyGardz™ ist ein zweiseitiges Material. Die Aussenseite ist glatt und flüssigkeitsabweisend, die Innenseite weich wie Baumwolle. Die spezielle Innenseite von BodyGardz™ macht das Material atmungsaktiv und garantiert, dass Feuchtigkeit nach aussen abtransportiert wird.

Die Labormäntel sind in folgenden Grössen erhältlich:

S	8080-LM/S40-W
M	8080-LM/M40-W
L	8080-LM/L40-W
XL	8080-LM/XL40-W



Preise in CHF/Preiseinheit (PE); exkl. MWST		Abnahmemenge [Pk.]					
Produkt Nr.	Pack à	1 Pk		3 Pk		10 Pk	
8080-LM/L40-W	1 Stk.	78.00/	1 Pk	74.00/	1 Pk	69.00/	1 Pk
8080-LM/M40-W	1 Stk.	78.00/	1 Pk	74.00/	1 Pk	69.00/	1 Pk
8080-LM/S40-W	1 Stk.	78.00/	1 Pk	74.00/	1 Pk	69.00/	1 Pk
8080-LM/XL40-W	1 Stk.	78.00/	1 Pk	74.00/	1 Pk	69.00/	1 Pk
83M-4111(HD)	300 Stk.	1'260.00/	1 Pk	1'200.00/	1 Pk	1'080.00/	1 Pk
83M-4111(SD)	300 Stk.	1'120.00/	1 Pk	1'080.00/	1 Pk	960.00/	1 Pk
83M-4114(HD)	300 Stk.	1'080.00/	1 Pk	1'040.00/	1 Pk	940.00/	1 Pk
83M-4114(SD)	300 Stk.	1'080.00/	1 Pk	1'040.00/	1 Pk	940.00/	1 Pk
83M-4115(HD)	300 Stk.	990.00/	1 Pk	950.00/	1 Pk	850.00/	1 Pk
83M-4115(SD)	300 Stk.	990.00/	1 Pk	950.00/	1 Pk	850.00/	1 Pk
83M-4130(HD)	300 Stk.	1'080.00/	1 Pk	1'040.00/	1 Pk	940.00/	1 Pk
83M-4130(SD)	300 Stk.	1'080.00/	1 Pk	1'040.00/	1 Pk	940.00/	1 Pk
83M-4211(HD)	150 Stk.	700.00/	1 Pk	670.00/	1 Pk	600.00/	1 Pk
83M-4211(SD)	150 Stk.	670.00/	1 Pk	640.00/	1 Pk	580.00/	1 Pk
83M-4214(HD)	150 Stk.	650.00/	1 Pk	620.00/	1 Pk	560.00/	1 Pk
83M-4214(SD)	150 Stk.	650.00/	1 Pk	620.00/	1 Pk	560.00/	1 Pk
83M-4215(HD)	150 Stk.	650.00/	1 Pk	620.00/	1 Pk	560.00/	1 Pk
83M-4215(SD)	150 Stk.	650.00/	1 Pk	620.00/	1 Pk	560.00/	1 Pk
83M-4230(HD)	150 Stk.	650.00/	1 Pk	620.00/	1 Pk	560.00/	1 Pk
83M-4230(SD)	150 Stk.	650.00/	1 Pk	620.00/	1 Pk	560.00/	1 Pk
83M-4240(HD)	150 Stk.	710.00/	1 Pk	680.00/	1 Pk	610.00/	1 Pk
83M-4311(HD)	90 Stk.	570.00/	1 Pk	540.00/	1 Pk	490.00/	1 Pk
83M-4311(SD)	90 Stk.	520.00/	1 Pk	500.00/	1 Pk	450.00/	1 Pk
83M-4314(HD)	90 Stk.	510.00/	1 Pk	480.00/	1 Pk	440.00/	1 Pk
83M-4314(SD)	90 Stk.	510.00/	1 Pk	480.00/	1 Pk	440.00/	1 Pk
83M-4315(HD)	90 Stk.	510.00/	1 Pk	480.00/	1 Pk	440.00/	1 Pk
83M-4315(SD)	90 Stk.	510.00/	1 Pk	480.00/	1 Pk	440.00/	1 Pk
83M-4330(HD)	90 Stk.	510.00/	1 Pk	480.00/	1 Pk	440.00/	1 Pk
83M-4330(SD)	90 Stk.	510.00/	1 Pk	480.00/	1 Pk	440.00/	1 Pk
83M-4340(HD)	90 Stk.	550.00/	1 Pk	520.00/	1 Pk	470.00/	1 Pk